


LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW

- ▶ HME mit Verschlussmöglichkeit durch leichten Fingerdruck
- ▶ Kombiniert die Vorteile eines HME mit einem hygienischen Fingerschluss und einem ansprechenden Design
- ▶ HighFlow HME, mit geringem Atemwiderstand und besonders bei starker körperlicher Belastung und für Neu-Anwender von HMEs geeignet
- ▶ Das HME wird durch eine Verschlussplatte abgedeckt, um einen gleichmäßig ebenen Verschluss des HMEs während des Sprechens sicherzustellen
- ▶ Die Verschlussplatte schließt bereits bei leichtem Fingerdruck, selbst wenn der Druck nicht ganz zentrisch ausgeübt wird
- ▶ Die Verschlussplatte wird ihrerseits durch eine große Kunststoffkappe abgedeckt, um eine mögliche Kontamination des Fingers durch Sekret oder auch andersherum eine mögliche Kontamination des HMEs durch mikrobielle Kontamination des Fingers auszuschließen
- ▶ Die Luft beim Ein- und Ausatmen strömt durch seitliche Öffnungen am HME
- ▶ Dadurch kein Ansaugen der Kleidung oder des Schutztuches an das HME während des Einatmens
- ▶ HME mit 22 mm Adapter (KOMBI) kann mit allen LARYVOX® Tape Basisplatten und allen herkömmlichen Basisplatten mit 22 mm Adapter verwendet werden
- ▶ LARYVOX® TOUCH HME HighFlow ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich



Nicht zur Wiederverwendung

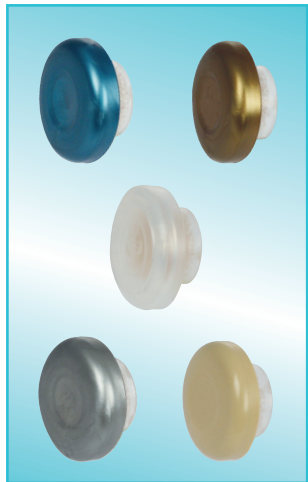

Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW - blue metallic, Verpackung mit 30 Stück

REF 49850-01

LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW - gold, Verpackung mit 30 Stück

REF 49850-02

LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW - silver, Verpackung mit 30 Stück

REF 49850-03

LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW - beige, Verpackung mit 30 Stück

REF 49850-04

LARYVOX® TOUCH HME HIGHFLOW - clear, Verpackung mit 30 Stück

REF 49850-13