


# LARYTAPE® / LARYTAPE® TOUCH

- ▶ Schaumstofffilter für laryngektomierte Patienten für eine gute Abdeckung und einen sicheren Schutz des Tracheostomas
- ▶ Darüberhinaus sorgt LARYTAPE® zu einem gewissen Maß für eine Anfeuchtung, Filterung und Erwärmung der Atemluft
- ▶ Die abgerundete Form ermöglicht eine hervorragende Anpassung an das Tracheostoma
- ▶ Der umlaufende, ununterbrochene Klebestreifen gewährleistet einen dichten und lückenlosen Sitz auf dem Tracheostoma; dadurch wirkt der Schaumstoff des LARYTAPE® wie ein HME mit mechanischen Schutz vor eindringenden Partikeln oder Insekten und durch die Rückhaltung von ausgeatmeter Feuchtigkeit und Wärme
- ▶ Die Klebekraft kann durch Anwendung des OPTIGARD® Hautschutzfilms und Haftverstärkers erhöht werden (s. separates Datenblatt)
- ▶ Wird in drei verschiedenen Größen (S, L und XL) und unauffälliger Farbe (beige) angeboten
- ▶ **Spezielle Variante: LARYTAPE® TOUCH mit Sprechoption (Druck-Button), um Fingerverschluss des Tracheostomas zu ermöglichen, wenn der Patient mit Hilfe einer Stimmprothese spricht**

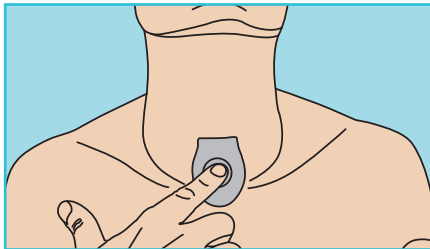

## Bestellhinweis:

**LARYTAPE® S**, 4 x 5,5 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45960**

**LARYTAPE® L**, 4,8 x 6,7 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45962**

**LARYTAPE® XL**, 6 x 8,5 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45963**

**LARYTAPE® TOUCH S**, 4 x 5,5 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45970**

**LARYTAPE® TOUCH L**, 4,8 x 6,7 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45972**

**LARYTAPE® TOUCH XL**, 6 x 8,5 cm, Verpackung mit 10 Stück

**REF 45973**

- ⊗ Nicht zur Wiederverwendung
- ☂ Trocken aufbewahren
- ☀ Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
- 📖 Gebrauchsanweisung beachten
- CE CE-Kennzeichnung