


- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen (IC)
- ▶ 15 mm Konnektor, Sprechventil und Hustenschutzkappe liegen jeweils der Kanüle bei und können durch einen einfachen Drehsicherheitsverschluß in der benötigten Kombination mit dem Kanülenrohr verbunden werden.
- ▶ Thermosensitiver medizinischer Kunststoff
- ▶ Weiches und biegsames Kanülenschild
- ▶ Die spezielle Formung der Kanüle ermöglicht das Sprechen, obwohl die Kanüle nicht gefenstert ist (die auszuatmende Luft umströmt die Kanüle)
- ▶ 15 mm Konnektor, Kanülenschild und Innenkanülen sind farbcodiert: der 15 mm Konnektor ist durchgefärbt, das Kanülenschild und die Innenkanülen sind durch einen farbigen Punkt markiert
- ▶ Kanülentrageband enthalten: breit, verstellbar, mit Klettverschluß
- ▶ Sprechventil auch separat erhältlich (FAHL® BIESALSKI Speaking valve - REF 17901)
- ▶ Innenkanülen auch separat erhältlich (FAHL® BIESALSKI IC - REF 17905)



### Bestellhinweis:

**FAHL® BIESALSKI 2 IC + Speaking valve, Größe 4-12**

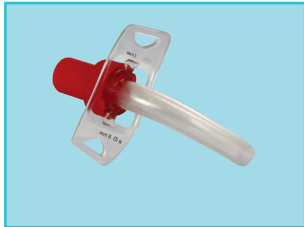

**REF 17900**

**FAHL® BIESALSKI IC (passend für Größe 6-12), Packung mit 3 Stück**



**REF 17905**

**FAHL® BIESALSKI Speaking valve S (passend für Größe 4-7)**

**REF 17901-01**

**FAHL® BIESALSKI Speaking valve M (passend für Größe 8-9)**

**REF 17901-02**

**FAHL® BIESALSKI Speaking valve L (passend für Größe 10-12)**

**REF 17901-03**

Bei Bestellung bitte die Größe hinter der Artikelnummer angeben!

**STERILE EO** Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only** ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**

| Größe | A.D. Spitze mm | A.D. Schild mm | I.D. A-Kanüle mm | I.D. I-Kanüle mm | Länge mm | Farbcode | REF      |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 4     | 5,6            | 8,4            | 4,0              | 2,3              | 44,0     | weiß     | 17900-04 |
| 5     | 6,5            | 9,0            | 5,0              | 3,3              | 46,0     | grün     | 17900-05 |
| 6     | 7,7            | 9,7            | 6,0              | 3,9              | 52,0     | orange   | 17900-06 |
| 7     | 8,6            | 11,0           | 7,0              | 5,0              | 60,0     | braun    | 17900-07 |
| 8     | 9,7            | 12,0           | 8,0              | 5,9              | 66,0     | rot      | 17900-08 |
| 9     | 11,5           | 14,0           | 9,0              | 7,0              | 71,0     | gelb     | 17900-09 |
| 10    | 12,1           | 15,0           | 10,0             | 7,9              | 75,0     | grau     | 17900-10 |
| 11    | 12,4           | 16,0           | 11,0             | 9,2              | 78,5     | lila     | 17900-11 |
| 12    | 13,9           | 17,0           | 12,0             | 9,8              | 77,0     | blau     | 17900-12 |

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen