


- ▶ Sprechventil - transparent, geringes Gewicht
- ▶ Mit Silikonmembran
- ▶ Ventilmembran ist in der Grundstellung geschlossen und wird beim Einatmen kurzzeitig geöffnet.  
Vorteil: Es wird kein größerer Anblasdruck benötigt, um das Ventil zu schließen und so das Sprechen zu ermöglichen. Dadurch geringere Ermüdung des Patienten und bessere Sprechqualität
- ▶ Mit Multipadapter: passt sowohl auf 15 mm Konnektor (UNI) als auch auf 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar.
- ▶ COMBIPHON® O<sub>2</sub> mit Sauerstoffanschluss
- ▶ Steril
- ▶ Einzeln verpackt

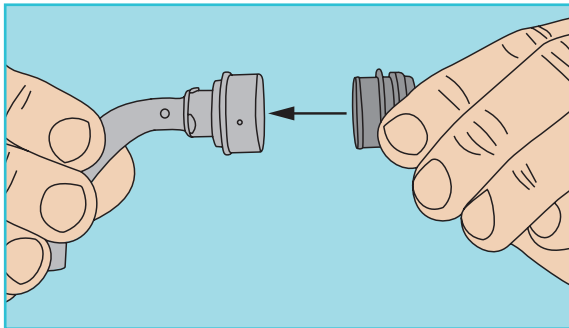

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Trocken aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

## Bestellhinweis:

COMBIPHON®

COMBIPHON® O<sub>2</sub>

REF 27131

REF 27132