


BLOM-SINGER® DUAL VALVE™ INDWELLING / DUAL VALVE™ INDWELLING LF (LARGE FLANGE) VOICE PROSTHESIS

- ▶ Das Blom-Singer® DUAL VALVE™ Indwelling Shunt-Ventil ist eine Verweilprothese und verfügt über zwei eigenständige aufeinander folgende Niederdruckventile aus silberoxidhaltigem Silikon
- ▶ Sollte eines der beiden Ventile aufgrund von Candida-Befall versagen, sichert das zweite Ventil die weitere Funktionstüchtigkeit
- ▶ Das Blom-Singer® DUAL VALVE™ Indwelling LF (Large Flange) Shunt-Ventil bietet eine Funktionserweiterung zur Blom-Singer® DUAL VALVE™ Indwelling
- ▶ Es verfügt zusätzlich über zwei vergrößerte Flange (ösophageal und tracheal) zur indikationsgerechten Versorgung periprothetischer Leckagen
- ▶ Beide Shunt-Ventile sind in der Schaftstärke 20 Fr. sowie in den Größen 6 - 14 erhältlich
- ▶ Mit Hilfe des LARYVOX® INSERTER kann das Shunt-Ventil einfach und schnell anterograd platziert, bzw. gewechselt werden:
LARYVOX® INSERTER (REF 25900) - für unterschiedliche Shunt-Ventile
LARYVOX® INSERTER EXPERT (REF 25910) - für 16 Fr. Shunt-Ventile (oder DUAL VALVE™ 20 Fr.)
Platzierung mit Gelkapseltechnik:
LARYVOX® INSERTER SPECIAL - (REF 25920) - für schwierige Tracheostoma-Anlagen

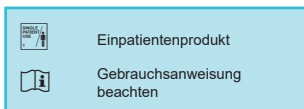

Bestellhinweis:

Blom-Singer® DUAL VALVE™ Indwelling	20 Fr.	Größe 6-14	REF DV20XX-NS
Blom-Singer® DUAL VALVE™ Indwelling LF (Large Flange)	20 Fr.	Größe 6-14	REF DV20XX-LF
LARYVOX® INSERTER			REF 25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT			REF 25910
LARYVOX® INSERTER SPECIAL			REF 25920